

Hidro Health RGP1

Hidro Health RGP2

Hidro Health RGP1

Limpiador para lentes de contacto rígidas y permeables al gas

Hidro Health RGP1 sirve para la limpieza diaria de lentes de contacto rígidas y permeables al gas. El efecto de limpieza de Hidro Health RGP1 está garantizado por pequeñas partículas presentes en la solución, que eliminan los depósitos de la lente de contacto.

Modo de empleo


1. Lávese las manos.
2. Agitar la botella antes de cada uso.
3. Coloque la lente en la palma de la mano y añada unas gotas de Hidro Health RGP1 sobre la lente.
4. Frótela con cuidado unos 10-20 segundos entre las yemas de los dedos.
5. Aclare la lente con abundante solución conservadora o solución salina, para eliminar completamente el limpiador.
6. Llene el portales con Hidro Health RGP2 y deje las lentes ahí durante toda la noche o al menos 6 horas.

Precauciones

- El producto no es apropiado para lentes de contacto blandas.
- Esta solución no debe entrar en contacto con los ojos. En caso de que ocurriera, aclararlos con agua.
- Cerrar bien la botella después de su uso.
- No tocar el gotero con los dedos.
- Compruebe si el precinto está intacto antes de su primera utilización.
- Consumir el producto en un plazo de 90 días después de la fecha de apertura.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilice el producto si es alérgico a alguno de sus componentes.

Composición

Cloruro sódico, lauriléter sulfato, gel de sílice, dióxido de titanio, ácido bórico, tetraborato sódico, edetato disódico 0,1% y polihexametilénbiguanida 0,001% en agua purificada.

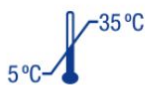

Texto revisado el 22.1.2013

Hidro Health RGP2

Solución conservadora para lentes de contacto rígidas y permeables al gas

Solución conservadora para la desinfección y conservación de lentes de contacto permeables al gas y rígidas.

Debido a la buena humectación de Hidro Health RGP2, se prolonga el confort en el porte de las lentes.

Modo de empleo


1. Lávese las manos.
2. Tras la limpieza con Hidro Health RGP1, llene el portalentes con Hidro Health RGP2 y deje las lentes en el portalentes toda la noche o al menos 6 horas. Las lentes de contacto tienen que estar totalmente cubiertas con la solución.
3. Extraiga las lentes del portalentes y aclárelas con Hidro Health RGP2 antes de ponérselas.
4. En caso de que necesite quitarse las lentes a lo largo del día, huméctelas antes de ponérselas con unas gotas de Hidro Health RGP2.

Precauciones

- Utilice siempre una solución fresca para la desinfección de las lentes de contacto y deseche la utilizada anteriormente.
- Cerrar bien la botella después de su uso.
- No tocar el gotero con los dedos.
- Compruebe antes de la primera utilización del producto que el precinto está intacto.
- Consumir el producto en un plazo de 90 días desde su apertura.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No use el producto si es alérgico a alguno de sus ingredientes.
- En caso de irritación de los ojos quítese las lentes, no siga utilizando el producto y acuda enseguida a un médico o al especialista en lentes de contacto.
- Las lentes se pueden conservar en el portalentes cerrado un máximo de 30 días.

Composición

Cloruro sódico, ácido bórico, tetraborato sódico, hidroxipropilmetilcelulosa, poloxamer, edetato disódico 0,1% y polihexametilen biguanida 0,0004% en agua purificada.

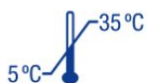

Texto revisado el 22.1.2013