INSTRUCCIONES DE USO

ESTE FOLLETO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USO Y LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO. LÉALO ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO. EL PROCESO DE ADAPTACIÓN A LAS LENTES DE CONTACTO DEBE ESTAR SUPERVISADO POR UN PROFESIONAL DE LA VISIÓN. ES ESENCIAL QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL PROFESIONAL DE LA VISIÓN Y DEL PROSPECTO PARA UN USO ADECUADO DE LAS LENTES DE CONTACTO.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (nombre)

- Lentes de contacto AIR OPTIX™ COLORS (Lotrafilcon B)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las lentes contienen aproximadamente un 33 % de agua y un 67 % de Lotrafilcon B, una silicona fluorada que contiene un tratamiento superficial de hidrogel. En la superficie posterior de la lente se incluye un patrón impreso cosmético que contiene una combinación de los siguientes aditivos de colores: violeta carbazol, óxidos de hierro, [ftalocianinato (2) de cobre], ftalocianina verde y dióxido de titanio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE RENDIMIENTO

Propiedades de la lente

- Índice de refracción (hidratado): 1,42
- Transmitancia luminosa: 95 % ± 5 %
- Permeabilidad al oxígeno (Dk): 110 x 10^{-11} (cm^2/seg) (ml O_2 /ml x mm Hg), medida a 35°C (método Dk-coulométrico intrínseco)
- Contenido de agua: 33 % del peso en solución salina normal

Parámetros de las lentes disponibles

- Diámetro de la lente: 14,2 mm
- Curva base: 8,6 mm
- Espesor central: De 0,08 mm a -3,00 D (varía con la potencia)
- Potencias: Negativa: De -0,25 D a -6,00 D (en intervalos de 0,25 D) De -6,50D a -8,00 D (en intervalos de 0,50 D) Positiva: De +0,25 D a +6,00 D (en intervalos de 0,25 D)
- Colores impresos: amatista, azul, azul brillante, marrón, verde gema, gris, verde, miel, avellana puro, gris plateado, zafiro azul, turquesa

ACCIONES (modo de acción)

Al humectarlas y colocarlas sobre la córnea, las lentes de contacto graduadas de Lotrafilcon B actúan como medio refractivo para enfocar los rayos de luz sobre la retina.

En las lentes de contacto de Lotrafilcon B, graduadas o sin graduar, con impresión en color, el patrón impreso se mezcla con el color natural del ojo para mejorar o alterar el color aparente del mismo.

USO INDICADO

Las lentes de contacto blandas de Lotrafilcon B graduadas con impresión en color están previstas para su uso en los ojos de personas con los ojos sanos, que necesitan corrección visual (miopía e hipermetropía) y desean mejorar o alterar el color aparente del ojo, según lo determinado y adaptado por un profesional de la visión.

Uso indicado específico del diseño de la lente (modelo)

Diseño de la lente (modelo)	Uso indicado (en el ojo)
Lentes esféricas con poder corrector e impresión en color	Corrección óptica de la ametropía refractiva (miopía e hipermetropía)

GRUPOS DE PACIENTES OBJETIVO

La población de usuarios objetivo para las lentes de contacto blandas con tinte de manipulación de Lotrafilcon B incluye a personas con ojos sanos que necesitan una corrección visual (miopía y/o hipermetropía), que se pueden adaptar adecuadamente al dispositivo y que son capaces de comprender y seguir las instrucciones de uso, mantenimiento y seguridad (o cuentan con alguien que pueda hacerlo por ellos). Las lentes de contacto suelen llevarlas adultos y adolescentes. Los niños solo pueden utilizar lentes de contacto bajo el control de un profesional de la visión cualificado y con la supervisión de sus progenitores.

Las lentes de contacto AIR OPTIX™ COLORS también incluyen una impresión cosmética en color para los pacientes que deseen mejorar o alterar el color aparente de sus ojos.

BENEFICIOS CLÍNICOS

Las lentes de contacto de Lotrafilcon B graduadas proporcionan una corrección de la visión en el propio ojo para la miopía y/o la hipermetropía, según lo determinado y establecido por un profesional de la visión.

Las lentes de contacto con poder de refracción aportan ventajas funcionales sobre las gafas al mejorar la visión periférica (lateral) y minimizar las diferencias de tamaño de la imagen, algo que se logra cuando la potencia de las lentes entre los ojos no es la misma.

INDICACIONES (usos)

Las lentes de contacto blandas esféricas AIR OPTIX* COLORS (Lotrafilcon B) con poder de refracción están indicadas para un uso diurno, para la corrección óptica de la ametropía refractiva (miopía e hipermetropía) en personas fáquicas o afáquicas con ojos sanos y con hasta aproximadamente 1,50 dioptrías de astigmatismo que no interfieren en la agudeza visual.

Las lentes de contacto blandas AIR OPTIX* COLORS (Lotrafilcon B) también actúan para mejorar o alterar el color aparente del ojo.

Las lentes están previstas para un uso con sustitución frecuente o planificada y extracción diaria para su limpieza y desinfección antes de volverse a colocar, según lo recomendado por el profesional de la visión. Las lentes deben desecharse y reemplazarse por un par nuevo cada mes o con mayor frecuencia si el profesional de la visión así lo recomienda.

CONTRAINDICACIONES (motivos para no utilizarlas)

Las lentes de contacto no se deberían usar si se dieran ciertas condiciones ambientales o en caso de trastornos. Entre los trastornos que pueden evitar o interferir con el uso seguro de las lentes de contacto se incluyen:

- Alergia, inflamación, infección o irritación en el ojo o en torno al mismo o a los párpados.
- Película lagrimal inadecuada (ojo seco).
- Hipoestesia corneal (sensibilidad corneal reducida).
- Uso de algún medicamento que esté contraindicado o que interfiera con el uso de las lentes de contacto, incluidos los fármacos oculares.
- Cualquier trastorno sistémico que pueda verse agravado o que interfiera en el uso seguro de las lentes de contacto.
- Si detecta rojez o irritación en el ojo.

Consulte al profesional de la visión específicamente en relación con estos u otros trastornos.

ADVERTENCIAS

- Las lentes de uso diurno no están indicadas para llevarlas puestas durante la noche. Las lentes de contacto blandas AIR OPTIX™ COLORS no deben usarse para dormir.
- Las lentes de contacto, aunque se usen por motivos cosméticos, son productos sanitarios que solo deben usarse según las instrucciones y bajo la supervisión de un profesional de la visión.
- Problemas oculares graves, incluidas úlceras corneales (queratitis ulcerosas) pueden desarrollarse rápidamente y provocar pérdida de visión.
- El uso de lentes de contacto aumenta el riesgo de padecer infecciones oculares. Dormir con lentes y/o fumar aumentan aún más el riesgo de padecer queratitis ulcerosa para los usuarios de lentes de contacto (Schein, 1989; Cutter, 1996).
- Si el paciente nota molestias oculares, la sensación de tener un cuerpo extraño, lagrimeo excesivo, cambios en la visión, enrojecimiento u otros problemas oculares, debe indicársele que se quite inmediatamente la lente y se ponga en contacto con su profesional de la visión.
- Los problemas con las lentes de contacto y los productos para su mantenimiento pueden provocar lesiones graves en el ojo. Es fundamental seguir las instrucciones del profesional de la visión y del prospecto para un uso adecuado de las lentes y de los productos para su mantenimiento.
- No deben utilizarse líquidos no estériles (como agua del grifo, agua destilada, una solución salina hecha en casa o saliva) como sustituto de ningún componente durante el proceso de mantenimiento de la lente. El uso de agua destilada y del grifo se ha asociado con la queratitis por Acanthamoeba, una infección corneal que es resistente al tratamiento y la cura.

PRECAUCIONES

Precauciones especiales para el profesional de la visión

- Al seleccionar el diseño de la lente y los parámetros adecuados, el profesional de la visión debe tener en cuenta todas las características de la lente que puedan afectar a la correcta adaptación de la lente y a la salud ocular, incluyendo la permeabilidad al oxígeno, el espesor central y periférico, y el diámetro de la zona óptica.
- Las lentes de prueba utilizadas durante los procesos de adaptación y diagnóstico deben desecharse tras un solo uso y no deben utilizarse para varios pacientes.
- La salud ocular del paciente y la correcta adaptación de la lente en el ojo debe evaluarse cuidadosamente en el momento de la entrega inicial, y debe hacerse un seguimiento continuado por parte del profesional de la visión.
- La fluoresceína, un tinte de color amarillo, no debe utilizarse mientras las lentes estén colocadas en los ojos del paciente. Las lentes absorben dicho tinte y se decoloran.
- Las lentes de contacto teñidas o impresas por motivos cosméticos pueden reducir la visibilidad en condiciones de baja iluminación.
- Las personas diabéticas pueden tener una sensibilidad corneal reducida y, por lo tanto, son más propensas a padecer lesiones corneales y a no cicatrizar tan rápidamente o completamente como las personas no diabéticas.
- Pueden producirse cambios en la visión o en la tolerancia de la lente durante el embarazo o el uso de anticonceptivos orales. Advierta a los pacientes de estos hechos.
- Los profesionales de la visión deben instruir a los pacientes para que se quiten la lente inmediatamente si el ojo se pone rojo o se irrita.
- Antes de abandonar la consulta del profesional de la visión, los pacientes deben ser capaces de quitarse las lentes rápidamente o deben estar acompañados de alguien más que pueda quitárselas.
- Es necesario realizar exámenes rutinarios del ojo para garantizar la salud ocular del paciente. Alcon recomienda que los pacientes visiten a un profesional de la visión al menos una vez al año, o con más frecuencia, según lo recomendado por el mismo.

Manipulación de las lentes y precauciones de uso

- Revise sus ojos diariamente para comprobar que tienen buen aspecto, se siente cómodo y su visión es clara.
- No usar si el envase está dañado o no está completamente sellado. El producto podría estar contaminado y provocar una infección importante en el ojo.
- Si un blíster se abre accidentalmente antes de que la lente se vaya a utilizar, dicha lente debe almacenarse en un estuche para lentes limpio. Los productos de mantenimiento de las lentes no son todos iguales, de modo que siga las instrucciones de uso del fabricante sobre cómo conservarlas, limpiarlas y desinfectarlas antes de ponérselas.
- Para mantener la salud y la seguridad de sus ojos, el calendario de uso de la lente deberá determinarlo un profesional de la visión. No use las lentes de contacto blandas AIR OPTIX™ COLORS mientras duerme.
- No comparta las lentes con nadie, ya que podría propagar microorganismos, que podrían causar problemas de salud graves en los ojos.
- Nunca deje que las lentes entren en contacto con líquidos no estériles (incluyendo el agua del grifo y la saliva), ya que podría producirse una contaminación microbiana y causar daños permanentes en el ojo.
- Nunca use agua, solución salina o gotas humectantes para desinfectar las lentes. Estas soluciones no desinfectan las lentes. El uso de una solución desinfectante no recomendada puede producir una infección severa, pérdida de visión o ceguera.
- Consulte a su profesional de la visión antes de usar las lentes durante actividades deportivas, como nadar y otras actividades acuáticas. La exposición al agua (u otros líquidos no estériles) con las lentes de contacto puestas en actividades como la natación, el esquí acuático y los baños de hidromasaje pueden aumentar el riesgo de padecer una infección ocular, como, por ejemplo, la queratitis por *Acanthamoeba*.
- Quítese y deseche las lentes cuando se hayan expuesto a vapor nocivo o irritante.
- Deseche una lente de contacto que se haya deshidratado o dañado. Sustitúyala por una lente nueva.
- Se recomienda que los usuarios de lentes de contacto visiten a su profesional de la visión al menos una vez al año o según las indicaciones.
- Informe a sus superiores de que utiliza lentes de contacto, especialmente si su trabajo implica el uso de equipos de protección ocular.
- Conserve anotada la corrección que necesita para cada ojo. Antes de colocarse la lente, compruebe que las dioptrías de cada pack se corresponden con las que necesita para ese ojo.
- No cambie de tipo de lente o de parámetros sin consultar primero con un profesional de la visión.

- Si deja de utilizar las lentes durante un período de tiempo, consulte con el profesional de la visión antes de volver a utilizarlas.
- Tenga cuidado al utilizar jabones, lociones, cremas, cosméticos o desodorantes, ya que pueden causar irritación si entran en contacto con las lentes.
- Póngase las lentes antes de aplicarse maquillaje y retírelas antes de quitárselo.
- Lleve siempre lentes de repuesto o tenga unas gafas siempre disponibles.
- No use las lentes una vez superada la fecha de caducidad.
- Las lentes de contacto teñidas o impresas por motivos cosméticos pueden reducir la visibilidad en condiciones de baja iluminación.
- Las lentes de contacto AIR OPTIX™ COLORS contienen óxido de hierro, un colorante con base metálica. Quítese las lentes antes de someterse a una resonancia magnética.

EFECTOS ADVERSOS (posibles problemas y qué hacer para solucionarlos)

Pueden surgir problemas con las lentes de contacto que pueden presentar uno o más de los siguientes signos y síntomas:

- Sensación de tener algo en el ojo (sensación de cuerpo extraño)
- Incomodidad con la lente
- Enrojecimiento ocular
- Sensibilidad a la luz (fotofobia)
- Quemazón, escozor, picor u ojos llorosos
- Reducción de la calidad de la visión
- Arco iris o halos en torno a las luces
- Incremento de las secreciones oculares
- Molestias o dolor
- Sequedad ocular persistente o severa

Si se ignoran, estos síntomas pueden dar lugar a complicaciones más graves.

QUÉ HACER SI SE DETECTA UN PROBLEMA

Si detecta alguno de los signos o síntomas anteriores, quítese inmediatamente las lentes.

- Si la incomodidad o los problemas desaparecen, observe las lentes cuidadosamente.
  - Si la lente presenta algún tipo de daño, no vuelva a ponérsela en el ojo. Sustitúyala por una lente nueva o consulte al profesional de la visión.
  - Si una lente tiene suciedad, una pestaña o un cuerpo extraño, o si el problema desaparece y la lente no parece dañada, límpiela minuciosamente, aclárela y desinféctela antes de volver a colocársela.
- Si los síntomas anteriores continúan después de retirar la lente o al volver a colocársela, quítesela inmediatamente y póngase en contacto con su profesional de la visión.

Puede padecer algún trastorno grave como una infección, una úlcera corneal (queratitis ulcerosa) o iritis. Estos trastornos pueden progresar rápidamente y causar la pérdida permanente de la visión. Reacciones menos graves como abrasiones, manchas epiteliales y conjuntivitis bacteriana se deben controlar y tratar lo antes posible para evitar complicaciones.

- La sequedad ocasional puede aliviarse parpadeando varias veces o con el uso de gotas humectantes para lentes de contacto aprobadas para su uso con lentes de contacto blandas. Si la sequedad persiste, consulte a su profesional de la visión.
- Si una lente se adhiere (deja de moverse), aplique varias gotas de una solución humectante para lentes de contacto y espere hasta que comience a moverse libremente sobre el ojo antes de intentar quitársela. Si el problema persiste, consulte a su profesional de la visión.
- Si una lente se descentra dentro del ojo, puede volver a centrarse:
  - cerrando los ojos y masajeando suavemente la lente para colocarla en su lugar, o
  - mirando en el sentido de la lente y parpadeando suavemente, o
  - presionando suavemente sobre la lente descentrada para colocarla sobre la córnea con una ligera presión de los dedos en el borde del párpado superior o inferior.
- Si una lente se rompe dentro del ojo, retire los trozos cuidadosamente, tocando uno por uno como haría con la lente completa. Si los trozos no salen fácilmente, no pellizque el tejido del ojo. Enjuáguelo con solución salina estéril e intente de nuevo retirar los trozos de la lente. Si eso no ayuda, póngase en contacto con su profesional de la visión para obtener ayuda.

Emergencias generales:

Si se producen salpicaduras de productos químicos de cualquier tipo en los ojos (productos domésticos, soluciones para el jardín, productos químicos de laboratorio, etc.):

- Aclárese los ojos inmediatamente con una solución salina o agua del grifo.
- Quítese y deseche las lentes, y póngase en contacto inmediatamente con un profesional de la visión o acuda a Urgencias a un hospital sin demora.

NOTIFICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS ADVERSOS GRAVES

Cualquier incidente grave relacionado con el uso de este producto sanitario debe notificarse a Alcon Laboratories Inc.:

UE - Póngase en contacto con la oficina local de su país o su distribuidor de Alcon.

Correo electrónico: qa.complaints@alcon.com

Los acontecimientos adversos graves también deberán notificarse a las autoridades competentes sobre productos sanitarios de su Estado Miembro.

INSTRUCCIONES DE USO

CALENDARIO DE USO Y SUSTITUCIÓN RECOMENDADO

El calendario de uso y sustitución debe determinarlo un profesional de la visión según las necesidades individuales de cada paciente y en las condiciones fisiológicas. Las lentes se han aprobado únicamente para uso diurno (menos de 24 horas estando despierto) y deben quitarse para dormir. El tiempo de porte diario puede ir aumentándose gradualmente hasta alcanzar el máximo recomendado.

Las lentes deben desecharse y reemplazarse por un par nuevo cada mes o con mayor frecuencia si el profesional de la visión así lo recomienda.

INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN DE LAS LENTES

- Lávese y enjuáguese siempre las manos concienzudamente, y séqueselas completamente con una toalla limpia y que no suelte pelusas, antes de manipular las lentes de contacto.
- Sacuda suavemente el blíster (que contiene una lente nueva) antes de abrirlo.
- Extraiga la lente del blíster (o el estuche de almacenamiento si son lentes que ya ha utilizado) colocándola con cuidado en la palma de la mano.
- Asegúrese de que la lente está bien colocada (el lado correcto hacia fuera) y de que coloca la lente adecuada en cada ojo.
- Inspeccione las lentes antes de colocarlas.
- No se ponga lentes dañadas o sucias.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LAS LENTES

- Lávese y enjuáguese siempre las manos concienzudamente, y séqueselas completamente con una toalla limpia y que no suelte pelusas, antes de manipular las lentes de contacto.
- Coloque una lente sobre la punta de su dedo índice de la mano derecha o izquierda, limpio y seco. Coloque el dedo corazón de la misma mano cerca de las pestañas inferiores y tire hacia abajo del párpado inferior.
- Use los dedos de la otra mano para elevar el párpado superior.
- Coloque la lente directamente en el ojo (córnea) y aleje lentamente el dedo de la lente.
- Mire hacia abajo y suelte el párpado inferior lentamente.
- Mire hacia delante y suelte el párpado superior lentamente.
- Parpadee suavemente.

INSTRUCCIONES DE RETIRADA DE LAS LENTES

- Lávese y enjuáguese siempre las manos concienzudamente, y séqueselas completamente con una toalla limpia y que no suelte pelusas.
- Parpadee varias veces.
- Mirando hacia arriba, use la punta del dedo para deslizar la lente hacia abajo, hacia la parte blanca del ojo.
- Retire la lente sujetándola suavemente entre el dedo pulgar y el índice. No pellizque el tejido del ojo.
- Si le resulta difícil quitarse la lente, aplique una gota de solución lubricante y humectante e inténtelo de nuevo después de unos minutos.
- Nunca use pinzas, ventosas, objetos afilados ni las uñas para quitarse las lentes del ojo ni para extraerlas de su recipiente.

Si tiene algún problema para quitarse las lentes (están descentradas o dañadas), consulte el apartado **QUÉ HACER SI SE DETECTA UN PROBLEMA**.

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LENTES

Uso con sustitución

- Cada vez que se extraen las lentes del ojo, deben limpiarse cuidadosamente, aclararse y desinfectarse antes de volverse a utilizar.
  - El profesional de la visión debe recomendar un sistema de mantenimiento adecuado y ofrecer las instrucciones pertinentes. No cambie de sistema sin consultarlo antes con su profesional de la visión.
  - Los productos de mantenimiento de las lentes presentan diferentes usos e instrucciones. Para evitar problemas en los ojos o daños en las lentes, lea siempre y siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante de cada producto.
  - Con algunos productos de mantenimiento, las lentes se tienen que frotar y aclarar. Si es así, siga las instrucciones del fabricante en cuanto a la cantidad de solución utilizada y el tiempo de frotado y aclarado para reducir el riesgo de infecciones graves en los ojos.
- Sumergir y conservar las lentes:
  - Use solamente una solución fresca para el mantenimiento de las lentes de contacto cada vez que sumerja (almacene) las lentes.
  - La cantidad de tiempo que se pueden guardar las lentes antes de repetir el proceso de limpiarlas, aclararlas y desinfectarlas variará dependiendo del producto de mantenimiento utilizado. Siga las instrucciones del fabricante.
  - No reutilice ni use para "llenar hasta arriba" el estuche una solución antigua, ya que reduciría la desinfección efectiva de la lente y podría causar una infección importante, pérdida de visión o ceguera. "Llenar hasta arriba" se refiere a añadir una solución fresca a la solución que estaba en el estuche.
- Tras abrir un producto de mantenimiento de las lentes, deseche la solución restante tras el periodo recomendado por el fabricante del producto.
- No use productos diseñados solamente para lentes de contacto rígidas o permeables al gas.
- Nunca aplique calor con las soluciones de mantenimiento de las lentes ni para su desinfección.
- Nunca use agua, solución salina o gotas humectantes para desinfectar las lentes. Estas soluciones no desinfectan las lentes. El uso de una solución desinfectante no recomendada puede producir una infección severa, pérdida de visión o ceguera.

SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS LENTES

Siga las instrucciones del fabricante para los productos de mantenimiento de las lentes recomendados por el profesional de la visión. Alcon recomienda utilizar los siguientes productos, si están disponibles:

- AOSEPT™ PLUS con HydraGlyde™ Solución Limpiadora y Desinfectante
- OPTI-FREE™ PureMoist™ Solución Desinfectante Multi-Acción

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL ESTUCHE DE LAS LENTES

Las soluciones de mantenimiento de las lentes de contacto y los estuches para guardarlas son diferentes y tienen distintos fines e instrucciones de uso. Algunos estuches se han diseñado exclusivamente para guardar lentes de contacto, mientras que otros se han diseñado especialmente para contener un disco neutralizador para su uso con sistemas de limpieza y desinfectantes con peróxido de hidrógeno. Si no se utilizan diariamente, las lentes que se hayan limpiado y desinfectado se pueden guardar en su recipiente sin abrir durante un periodo de tiempo que varía en función de la solución y el estuche que se utilice. **Siga siempre las instrucciones y las indicaciones del fabricante para los productos de mantenimiento de las lentes.**

- El profesional de la visión debe instruir al paciente sobre el uso de la solución o las soluciones recomendadas para el mantenimiento de las lentes y sobre el estuche para guardarlas.
- Los estuches pueden ser una fuente de crecimiento bacteriano y requieren la limpieza, el secado y la sustitución adecuados para evitar la contaminación o daños en las lentes:
  - Limpie los estuches de las lentes de contacto con una solución adecuada y séquelos siguiendo las instrucciones. Las instrucciones de secado, como el secado con aire o frotar con una toalla que no suelte pelusas, pueden variar según el estuche utilizado.
  - Renueve los estuches de sus lentes de contacto al menos cada 3 meses o según lo recomendado por el fabricante de los mismos.
  - Renueve los estuches para lentes de contacto especialmente diseñados que contengan un disco neutralizador siguiendo las directrices del fabricante o antes si las lentes limpias y desinfectadas le producen quemazón y escozor.

- No guarde las lentes ni aclare los estuches con agua ni ninguna otra solución no estéril. Use solamente una solución nueva para el mantenimiento de las lentes a fin de evitar la contaminación de las lentes o del estuche. El uso de una solución no estéril puede producir una infección severa, pérdida de visión o ceguera.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE
Para su eliminación, deposite las lentes de contacto y el blíster en el cubo de la basura, no en el lavabo ni en el inodoro. El envase de cartón y la cubierta de polipropileno (PP) del blíster deben depositarse en el cubo de la basura o reciclarse de acuerdo con la normativa de residuos local.

CONTENIDO DEL ENVASE (presentación)
Cada lente se suministra en un blíster de plástico sellado que contiene una solución salina tamponada con fosfato que tiene un 1 % de copolímero de 845 (0,2 % de vinilpirrolidona/dimetilaminoetilmetracrilato) y está esterilizado con vapor.

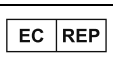
El envase blíster está marcado con los parámetros de la lente, incluyendo la curva base, el diámetro, la potencia esférica y el patrón/color de impresión de la lente, además del número de lote de fabricación, la fecha de fabricación y la fecha de caducidad.

Las lentes se suministran en cajas que contienen hasta 6 lentes de contacto selladas individualmente.

BIBLIOGRAFÍA
Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. The CLAO Journal. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. N Eng J Med. 1989; 321(12):773-83.

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS QUE PUEDEN APARECER EN EL ETIQUETADO

ABREVIATURA/SÍMBOLO	DEFINICIÓN
BC	Curva base
DIA	Diámetro
PWR	Potencia
D	Dioptría (potencia de la lente)
I	Izquierdo
R	Derecho
VP/DMAEMA	Vinilpirrolidona/dimetilaminoetilmetracrilato
	Signo de licencia de gestión de residuos de envases
	Código de lote
	Fecha de caducidad
EXP	Fecha de caducidad (consumo preferente)
	Sistema protector estéril único
	Esterilizado utilizando vapor de agua o calor seco
	Marca de conformidad europea
	Código de dos letras para el idioma (ejemplo: Inglés)
	Precaución
	Consúltense las instrucciones de uso
	No utilizar si el envase está dañado
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Producto sanitario
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Precaución: La legislación federal de EE. UU. limita la venta de este producto a un profesional de la visión autorizado



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, EE.UU.



Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Bélgica



Fecha de publicación: 01/2020

91024043-0120

Alcon

© 2020 Alcon, Inc.

