Acuaiss Baño ocular

Baño ocular con hialuronato sódico

Alivio de ojos irritados y cansados
Limpieza ocular en procesos alérgicos

Baño ocular
Solución estéril de cloruro sódico al 0,9% con hialuronato sódico.

Indicaciones

- Lavado para proporcionar alivio y frescor inmediato en el caso de cansancio ocular y enrojecimiento producido por sequedad ambiental, utilización de lentes de contacto, alergias, enrojecimiento producido por el cloro de piscinas...
- Lavado previo en afecciones oculares leves.

Instrucciones para el lavado ocular


1. Lávese las manos antes de usar el producto.
2. Llene la bañera ocular con la solución.
3. Inclinando ligeramente la cabeza hacia delante, coloque la bañera ocular llena sobre el ojo presionando muy suavemente.
   Nota: recomendamos que la solución esté templada para evitar un contraste de temperaturas.
4. Incline lentamente la cabeza hacia atrás hasta que note que el líquido cubre todo el ojo y mantenga esta posición durante todo el proceso.
5. Parpadee cada 5 segundos para favorecer el lavado y enjuagado del ojo.
6. Transcurridos unos treinta segundos (duración recomendada para el lavado), incline la cabeza nuavemente hacia delante y retire la bañera ocular.
7. Por último, seque el párpado y las pestañas con una compresa estéril o algodón hidrófilo.
8. Repetir la misma operación en el otro ojo utilizando una nueva cantidad de baño ocular.
9. Aclarar y dejar secar la bañera ocular.

Instrucciones para el lavado de los párpados

Empape una gasa estéril con Acuaiss Eye care y mantégala en contacto con el párpado durante 30 segundos, desplazando la gasa suavemente sobre el párpado y las pestañas.

Precauciones

- Asegúrese de que el precinto de garantía no esté roto cuando lo utiliza por primera vez.
- Mantenga el frasco bien cerrado cuando no lo esté utilizando y evite tocar con el gotero cualquier superficie.
- Conserve el producto a temperatura ambiente.
- Proteja el producto de una exposición solar prolongada.
- Compruebe que el precinto del producto está intacto antes de su primera utilización. Una vez abierto el envase, consúmase antes de treinta días.
- En caso de molestia persistente o irritación interrumpa el uso del producto y consulte a su especialista.
- No utilizar en caso de ser alérgico a alguno de sus ingredientes.
- Si es usuario de lentes de contacto, quíteselas antes de realizar el lavado ocular.
- Quitar el maquillaje de la superficie a tratar.
- Si está utilizando algún medicamento para los ojos, respete un intervalo de 20 minutos entre la aplicación de ambos productos.
- Mantenga el envase fuera del alcance de los niños.

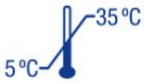



Composición

Cloruro sódico, fosfato disódico, fosfato monosódico, ácido hialurónico y polihexametilén biguanida 0,0002% en agua purificada.








Texto revisado el 16.11.2012