Solución Única para lentes de contacto rígidas y permeables al gas (RGP)

Limpieza simple y eficaz

Este producto es una solución única que limpia,desinfecta y aclara todo tipo de lentes de contacto rígidas y permeables al gas.

Modo de empleo

1. Lávese las manos antes de manipular sus lentes.
2. Quítese una de las lentes de contacto, sitúela sobre la palma de su mano, añada varias gotas de solución única y frote cuidadosamente ambas caras de la lente utilizando el dedo índice durante (20) veinte segundos.
3. Después de limpiar la lente, colóquela en el portalentes vacío, y añada solución única hasta que la lente quede completamente cubierta por el líquido.
4. Repita la misma operación con la otra lente de contacto.
5. Mantenga las lentes de contacto en el portalentes cerrado durante toda la noche o, al menos, durante (6) seis horas para conseguir una correcta desinfección.
6. Antes de ponerse las lentes, aclárelas durante (5) cinco segundos para retirar completamente los depósitos de la superficie de la lente e insértelas en los ojos.

Precauciones

- No reutilice el producto. Renueve el contenido de solución única del portalentes diariamente.
- Mantenga el producto bien cerrado cuando no esté en uso y evite el contacto del goteador con cualquier superficie.
- No utilice el producto si es alérgico a alguno de sus ingredientes.
- En caso de irritación persistente al utilizar el producto, quítese las lentes, no continúe utilizando el producto y consulte a su óptico.
- Compruebe que el precinto del producto está intacto antes de su primera utilización. Una vez abierto, consúmase antes de 90 días.
- Limpie el interior del portalentes con regularidad y déjelo secar al aire.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.


Composición

Cloruro sódico, ácido bórico, tetraborato sódico, poloxamer, hidroxipropilmetilcelulosa, edetato disódico 0,1% y polihexametilén biguanida 0,0004% en agua purificada.

Disop
Avda. Valdelaparra, 31-A
28108 Madrid. España

CE 0318

STERILE A

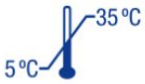



Texto revisado el 25.1.2010